




FÅ DINA HÖRAPPARATER ATT HÅLLA LÄNGRE!

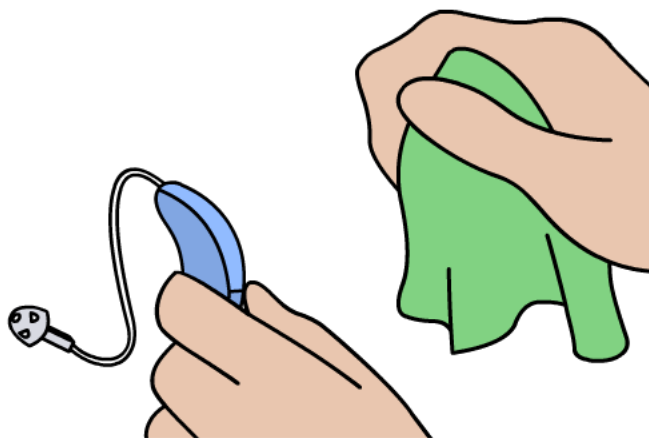

RENGÖR HÖRAPPARATEN
MINST EN GÅNG I VECKAN
MED EN TORR DUK.

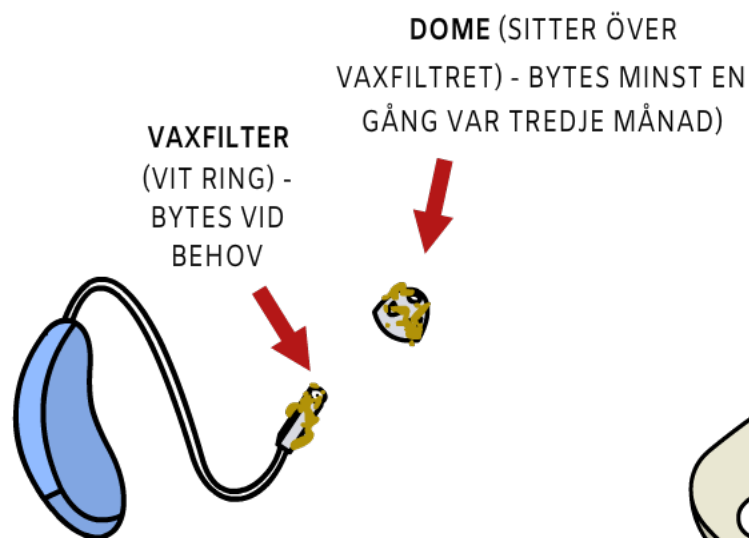


TORKA **DAGLIGEN** BORT
ÖRONVAX FRÅN **DOMEN**.
BYT **VAXFILTER** OM DÄR
FINNS VAX (SE NÄSTA SIDA
HUR MAN GÖR).

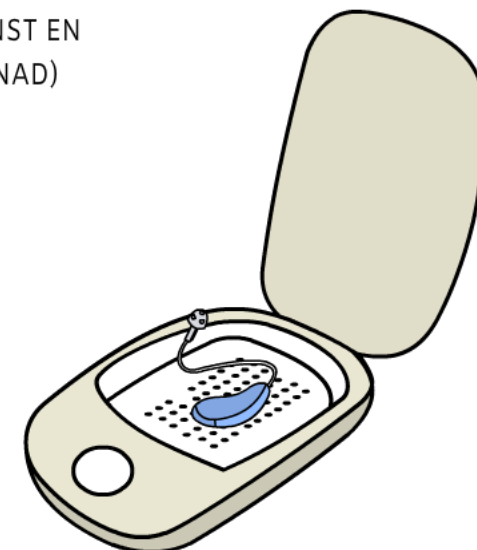


TORKA HÖRAPPARATERNA OM
DE BLIVIT BLÖTA (AV VÄDER,
SVETT OSV). VET DU MED DIG
ATT DU HAR FUKTIGA ÖRON?
KÖP EN **ELEKTRONISK TORKARE**
(OBS: EJ KOMPATIBELT MED
UPPLADDNINGSBART BATTERI).


HUR DU BYTER DITT VAXFILTER

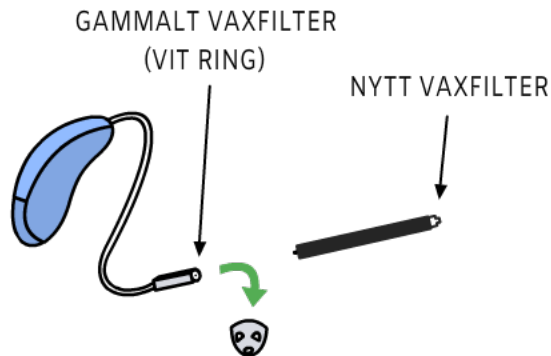

1. TA AV DOMEN OCH TA FRAM EN "VAXPINNE" MED NYTT VAXFILTER.

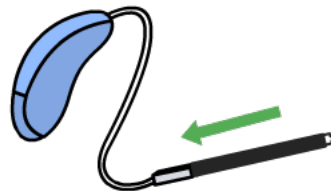

2. FÖR PINNEN MED TOMMA ÄNDEN RAKT IN I HÖRAPPARATENS GAMLA VAXFILTER.

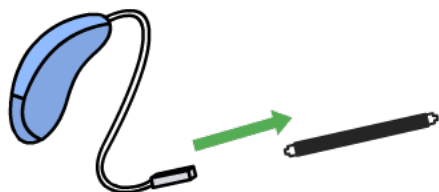


3. DRA SEDAN RAKT UT. DET GAMLA VAXFILTRET SITTER NU PÅ PINNEN.



4. VÄND RUNT PINNEN OCH GÖR LIKADANT IGEN - RAKT IN OCH RAKT UT. DET NYA VAXFILTRET SITTER NU PÅ HÖRAPPARATEN!

Fler sätt:

Liknande tillvägagångssätt fast med "vaxhållare" istället för "vaxpinne".

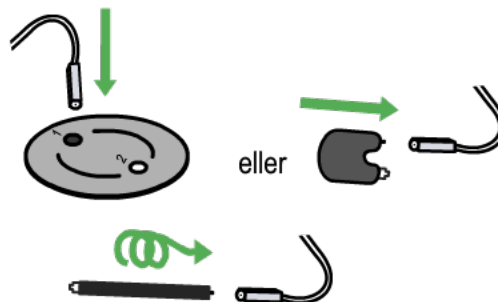

Samma "vaxpinne" men skruva in den.

NÅGOT FEL MED HÖRAPPARATEN?



- BYT BATTERI
- TORKA BORT VAX OCH SKRÄP FRÅN DOMEN ELLER BYT DOMEN HELT
- BYT VAXFILTRET
- FÖRSÖK PETA IN HÖRAPPARATSDELEN I ÖRAT LITE LÄNGRE IN I HÖRSELGÅNGEN.
- HAR DU OFTA VAXPROPPAR? ANVÄND VAXLÖSANDE MEDEL FRÅN APOTEKET ELLER GÅ TILL VÅRDCENTRAL FÖR VAXBORTTAGNING.
- FORTFARANDE PROBLEM? KONTAKTA DIN AUDIONOM.