

# Parkoppling

## Bluetooth Classic

### Hörapparater och iPhone



**OBS:** Det kan se lite annorlunda ut i din telefon jämfört med bilderna i denna bruksanvisning.

Om du stöter på problem, ta hjälp av någon i din omgivning med telefonvana.




Erik Nästesjö Todd  
[hosaudionomen.com](http://hosaudionomen.com)


Medverkande: Zandra Alm, leg. audionom

# Parkoppla hörapparaterna med din iPhone


(För att kunna lyssna på ljud från t.ex. telefonsamtal och musikprogram)

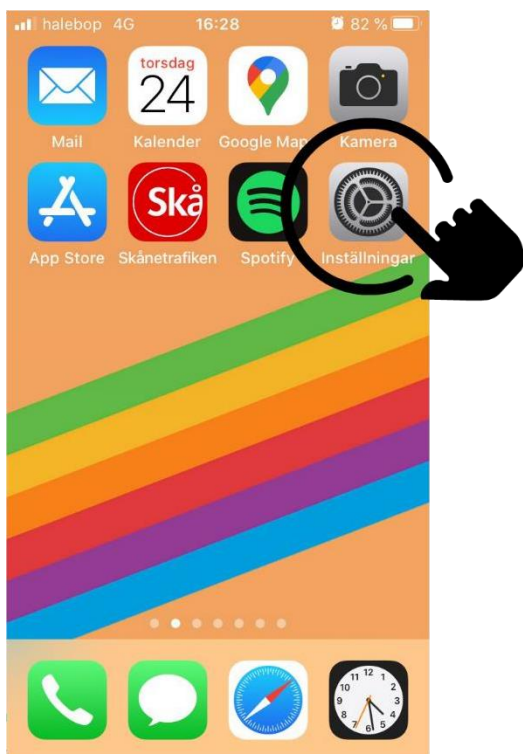

1. Hitta och tryck på Inställningar.

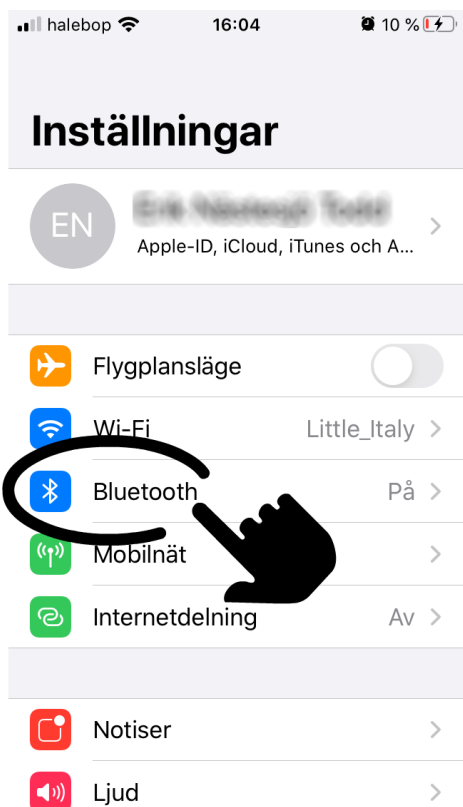

2. Tryck på Bluetooth.

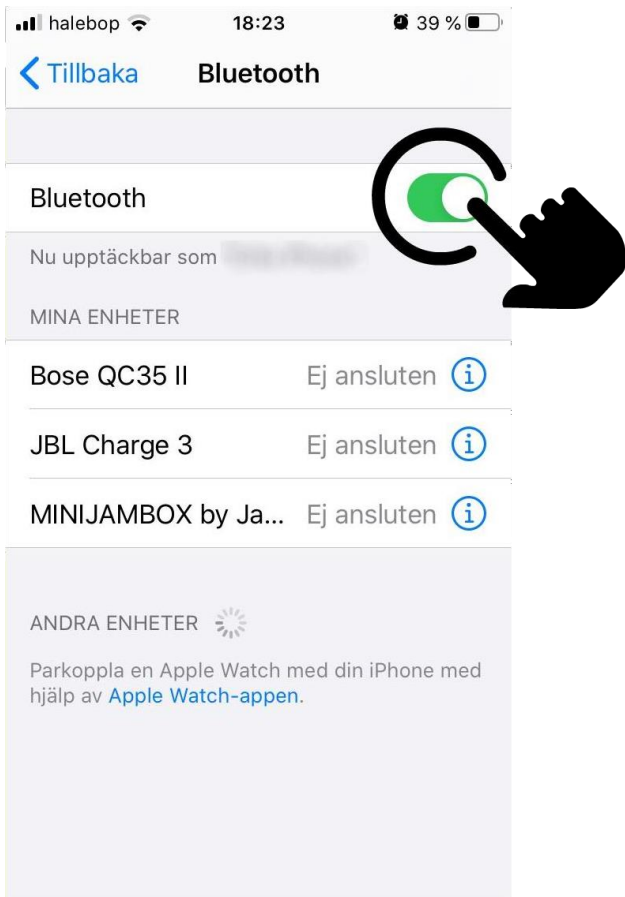

3. Slå på bluetooth om den inte redan är på (ska visa grönt).

Starta om hörapparaterna medan den söker. Ta dem i och ur laddaren om de är uppladdningsbara. Annars öppna och stäng batteriluckorna.



4. En av hörapparaterna ska dyka upp under "Andra enheter". Tryck på den och välj "parkoppla".


Om allt gått rätt till ska hörapparaten sedan hamna under "Mina enheter". Klart!

## Parkoppla hörapparaterna med app


(För att styra inställningar i hörapparaterna,  
t.ex. öka och sänka volymen)




1. Hitta och tryck på  
"App Store" och ladda  
ner appen "myPhonak".

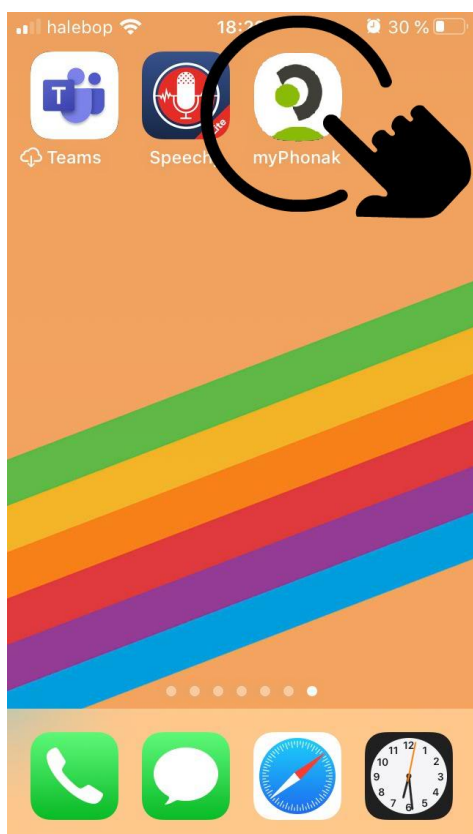

2. När du laddat ner  
appen, hitta den bland  
dina andra appar och  
tryck på den.

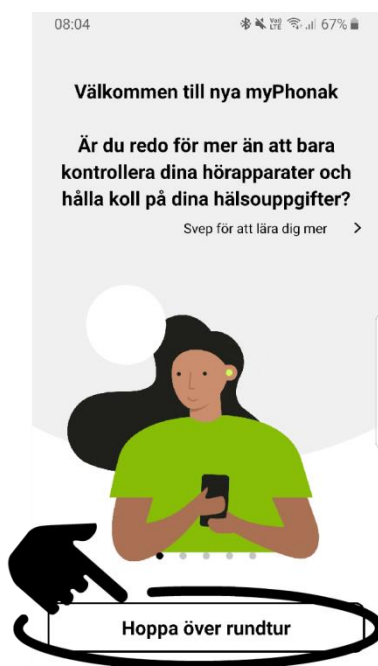

1. I början kommer en del introduktion. Du kan välja att läsa igenom eller trycka på **Hoppa över rundtur**. Du kan också välja mellan **Skapa konto** eller **Fortsätt utan konto**.

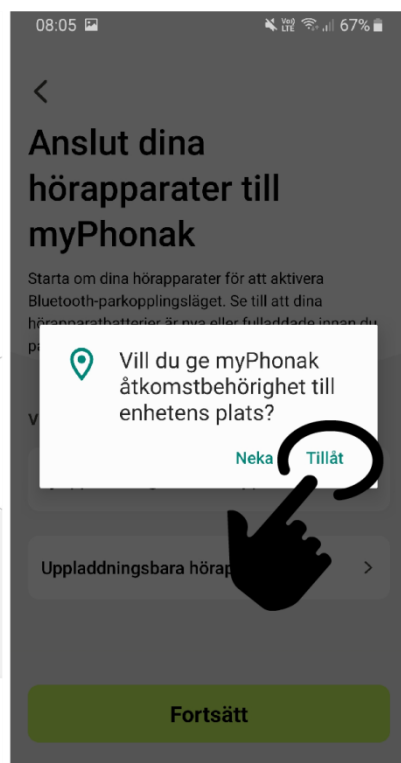

2. Tryck dig vidare på de **gröna knapparna**. **Tillåt** att ge åtkomstbehörighet till enhetens plats (nödvändigt för att komma vidare).



3. Nu behöver du först **starta om dina hörapparater** för att det ska hända något. Ta dem i och ur laddaren om de är uppladdnings-bara. Annars öppna och stäng batteriluckorna.

**Tryck** sedan på **hörapparaternas namn** när de dyker upp under "Hittade enheter".



4. Tryck på **OK** på begäran om sammankoppling

08:06


67%

## Parkopplingen har slutförts!

Du är nu redo att använda myPhonak app



5. Klicka på **Fortsätt**.

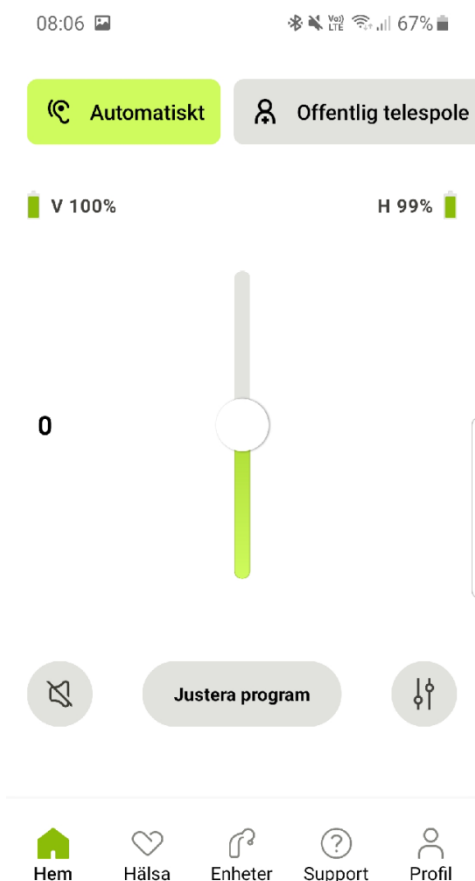

6. Grattis, nu kan du t.ex. ändra volymen och andra inställningar

**Klart!**

## Om något inte fungerar

(t.ex. om det inte kommer ljud upp i hörapparaterna eller att de inte hittas i appen)


- Starta om hörapparaterna och telefonen.
- Se till att ha senaste iOS uppdateringen.
- Prova att ta bort parkopplingen till hörapparaterna (se sid. 7 - 10) och gör sedan om parkopplingen (se sid. 1 – 5).
- Prova att ta bort andra parkopplingar som till enheter som du ändå inte använder.

*Om parkoppling gjorts men telefonsamtal fortsätter att komma från telefonen och inte in i hörapparaterna så kan du behöva ändra i telefonens inställningar:*

- Gå in på "inställningar"
- Scrolla ner och välj "hjälpmedel"
- Scrolla ner och välj "tryck"
- Scrolla ner och välj "Röstsamtalshantering"
- Välj "Bluetooth-headset" istället för Automatisk




# Ta bort parkoppling mellan Hörapparater och iPhone

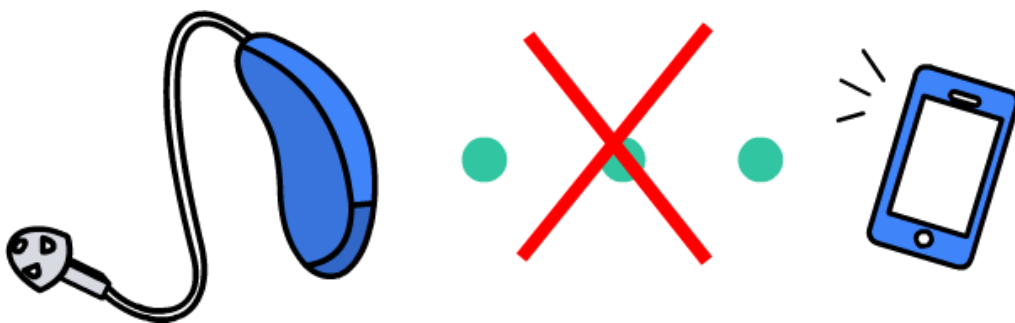

## Ta bort parkoppling mellan hörapparaterna och din iPhone (om det t.ex. slutar fungera av någon anledning)



1. Gå in igen på Bluetooth och tryck på i:et som står till höger om din hörapparat.

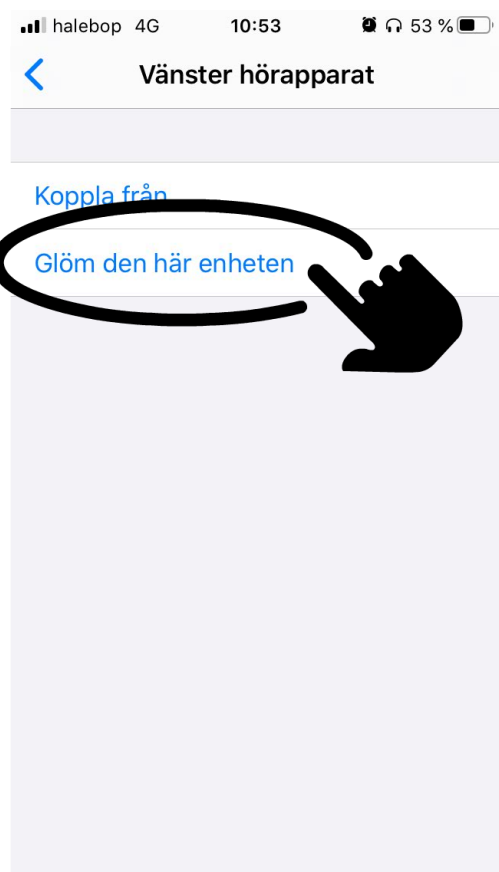

2. Tryck på "Glöm den här enheten".


Om du vill parkoppla igen så följ stegen på sid. 1 – 2.

# Ta bort parkoppling till appen


(om det t.ex. slutar fungera av någon anledning)



1. Gå in i appen och tryck på den **Enheter** i den nedre menyn.

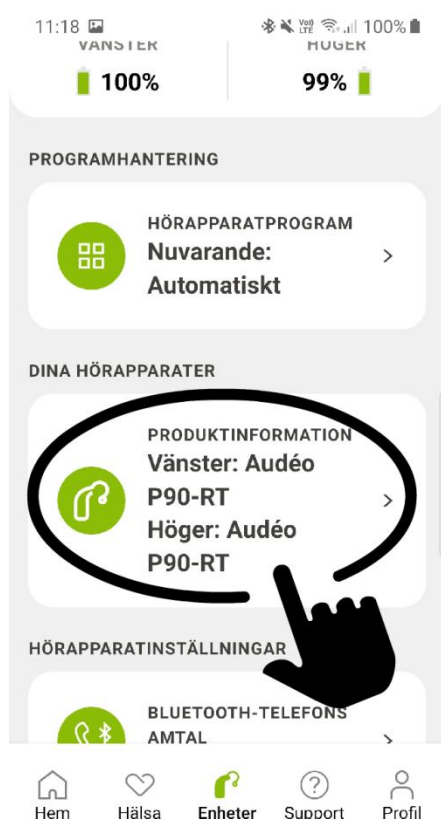

2. Scrolla ner och tryck på **Produktinformation** under "Dina hörapparater".

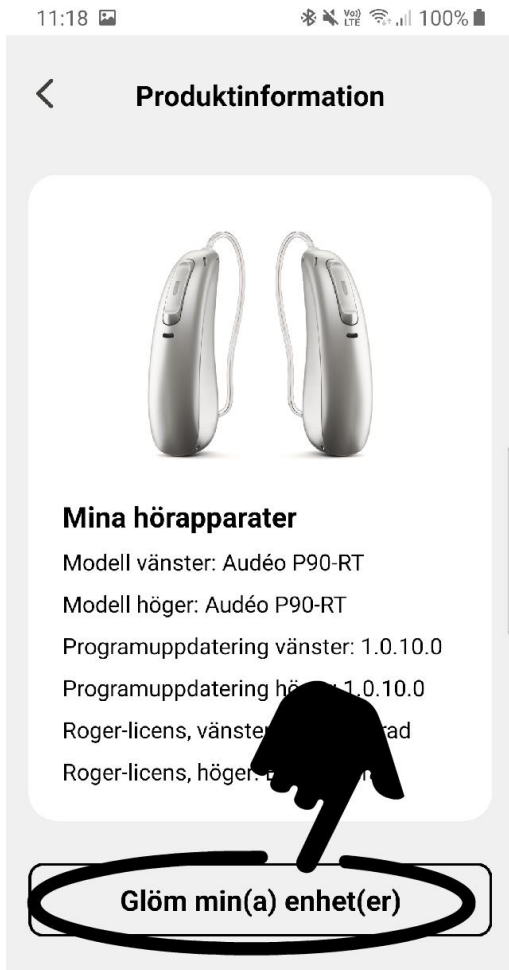

2. Tryck på **Glöm min(a) enhet(er)**.



3. Trycka på **Bekräfta**.

Du kan också behöva gå in på Bluetooth och ta bort hörapparaterna därifrån som det står **LE\_** framför. **Se sid. 8.**

Om du vill parkoppla igen så följ stegen på sid.